

Rhonda app

Detaillierte Ergebnisberichte



Kurze Übersicht

Die Rhonda app auf einem Tablet ist für die optionale Nutzung in Verbindung mit dem Rhonda player vorgesehen. Sie dient der Darstellung detaillierter PCR-Ergebnisse von Messungen, welche auf dem Rhonda player durchgeführt wurden. Die Rhonda app zeigt die Ergebnisse in drei Detailstufen mit jeweils zusätzlichem Informationsgehalt. In Stufe I wird das qualitative Ergebnis der Analyse angezeigt (positiv/negativ). In Stufe II werden einzelne Messergebnisse tabellarisch ausgewiesen. Dabei werden die gemessenen Analyseparameter und die Ergebnisse der integrierten Kontrollen angezeigt. Auf dieser Ebene erhalten Sie die Ct-Werte der Einzelmessung mit rein informativem Charakter. Stufe III bietet den höchsten Detailgrad mit grafischer Darstellung des Fluoreszenzsignals entsprechend der PCR-Amplifikationen. Ein Ergebnisreport kann mit Hilfe der Rhonda app erstellt, und entweder per E-Mail versendet, oder an einen Drucker weitergeleitet werden. Sie können die Rhonda app vorinstalliert auf dem Tablet über die Spindiag GmbH beziehen.

Ihre Vorteile


SICHER | EINFACH | EFFIZIENT

- **Detaillierte Berichte** in räumlicher Nähe zum Rhonda player direkt abrufen.
- Die von der Rhonda app **angezeigten Ergebnisse** basieren auf dem Goldstandard der **PCR-Methode**, mit welcher der Rhonda player misst.
- Die **Einrichtung und Einweisung** zur Bedienung erfolgt durch unseren Servicetechniker.
- Die anschließende Bedienung erfolgt über Ihr **eingewiesenes Personal**.
- **Sprachwahl**: Deutsch, Englisch (frei wählbar auf Rhonda player & Rhonda app).
- **Hohe Übertragungsgeschwindigkeit** der Messdaten, sofortiges Bereitstellen des Berichtes.
- **Ergebnisansicht in drei Detailstufen** wählbar.
- Berichte per **E-Mail** als .pdf versenden.
- Berichte **ausdrucken** und ablegen.
- Es **entfallen Wartezeiten** bis zum Erhalt eines detaillierten und ausdruckfähigen Ergebnisses.

Vorbereitung

Im Rahmen einer Rhonda player Neuinstallation verbindet Ihnen unser Servicetechniker die Rhonda app mit dem Rhonda player. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das Tablet mit einem Wi-Fi direct fähigen Drucker, oder über ein USB On-The-Go Kabel zu verbinden. Ebenso ist es möglich Ihr Tablet mit einem E-Mail-Account zu verknüpfen. Nach Bedarf können ausführliche Ergebnisse direkt in räumlicher Nähe zum Rhonda player angesehen, Ergebnisberichte ausgedruckt, oder per E-Mail versendet werden.

Detaillierte Informationen zum vollständigen Arbeitsablauf entnehmen Sie bitte der aktuellen Gebrauchsanweisung auf www.spindiag.de

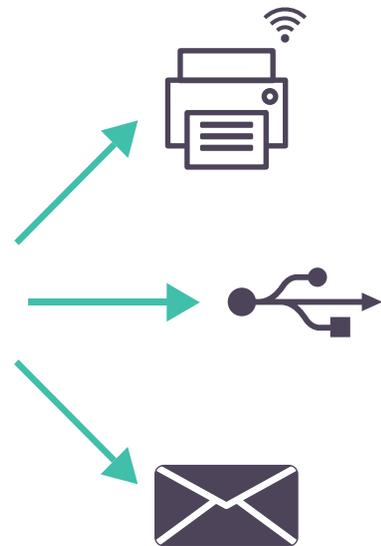

Bestellinformation

| Produkt | Artikelnummer | Bezugsquelle | Bestellkontakt |
|-----------------------|------------------|---------------|--|
| Tablet mit Rhonda app | SD000-04-T01-A01 | Spindiag GmbH | orders@spindiag.com |

Kontakt

Haben Sie Interesse an Rhonda für Ihre Einrichtung?
Wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Wenden Sie sich hierzu gerne an uns!

Web: www.spindiag.com/contact-form
E-Mail: sales@spindiag.com
Tel: +49 761 600 49 600